

gsSEAT

gsSEAT

256

*For små og store
voksne*



SP godkjent
Produsent:
GS seat as
[www.gsseat.](http://www.gsseat.com)

NR.2

GS-Seat 256 – Bilsetet som tilpasser seg dine mål og behov

GS seat 256 er utviklet spesielt til funksjonshemmede små og store voksne, der sikkerhet, komfort og totaløkonomi står i fokus.

Setet er kan justeres i størrelse og kurvatur.

Setet er SP godkjent i kategorien M1 som handicapsete

GS seat 256 Art. Nr 1400 (bredde 52cm) og **1401** (bredde 57cm)

Spesifikasjoner/Reguleringsmuligheter

Følgende er std. på alle setene

Nakkepute: Høydereg. 2,5 cm utvipp. Kurvatur bøyes til.

Rygg høyde 53 - 71 cm

Sittedybde 37 - 55 cm

Bredde mellom sidevanger rygg (setebredde 52cm) 25 – 37 cm

Bredde mellom sidevanger rygg (setebredde 57cm) 30 – 42 cm

Høydereg: sidevanger rygg 3,5 cm

Glideskinner 17 cm

Ryggvinkel 180 grader el.

Tilt: 25 grader el.

Korsryggstøtte el. Luftpute.

Bryterpanel: fastmontert håndkontroll, tilrettelagt for H/V montering, eller med spiral ledning for fleksibel bruk.

Tilbehør. Reguleringsmuligheter

Kne/lørstøtter mellom støtter (seteb. 52) 31 – 49 cm. (seteb. 57) 36 – 54 cm

Armlener, tilt. og oppvipp

Høydereg: Fotbrett 32 – 46 cm eller 40 – 54 cm (fra topp sittepute)

Vinkelreg: Fotbrett 90 – 45 grader, fotplater vinkelreg. og oppvipp

Seler, er kun til fiksering og må brukes sammen med sikkerhetsbelte i bilen.

Bekledning består av mørk grått stoff

Spesialtilpasning.

Setet er utviklet for å imøtekomme de fleste behov og løse det meste av problemstillinger.

Skulle det allikevel være behov for tilpasning så kan vi tilby dette direkte fra fabrikk.

Vi kjenner mulighetene og begrensningene i produktet.

Generell fremgangsmåte for tilpasse sete til bruker

Først justere til rett størrelse: sittedybde, rygg høyde, bredde mellom sidevanger.

Deretter kurvatur: ryggvinkel, kyfose (rygg øvre del) tilt sittepute.

Evt, justere høyde sidestøtter rygg og avgjøre behovet for hvor mye støtte og fiksering som behøves.



GS seat 256 Art. Nr 1400 52 cm bredde

GS seat 256 Art. Nr 1401 57 cm bredde

Std. el. Rygg, el. Tilt, el. Korsryggstøtte og glideskinner.



Leveres også med setevarme.

Art. Nr. 1402

Hud bekledding sort

Art. Nr. 1403



Vinkelbraketter til sidevanger rygg (par)
Anbefales til tynne eller små brukere
(Kan kun benyttes på std 12 cm dybde)
Art.nr: 1404




Sidevanger rygg 8 cm dybde (par)
Art nr: 1405 (Dette art. Nr. Erstatter std. Sidv rygg)
Art nr: 1406 (ved bestilling av sidevange som del)




Nakkepute med store støtter
Art nr: 1407 (Dette art. Nr. Erstatter std. Nakkeputen)
Art nr: 1408 (Brukes ved best. Av nakkepute som del)



Kne/ Lårstøtter, avtagbare (par)
Art.nr: 1409

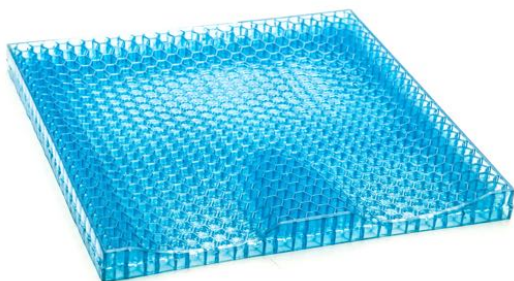

Trykkavlastende Gel Pute 40x40x3 cm.
(kontur) med anti slipp trekk
Art.nr: 1410

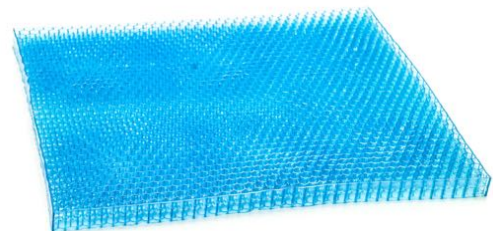

Trykkavlastende Gel Pute 45x40x2,5 cm
(flat) med anti slipp trekk
Art.nr: 1411

Tilbehør seler



Sele 5 punkt m. Polstring
Art. Nr. 1412



Brystsammenføring til
5 punkt sele
Art. Nr. 1337



Brystsele, borrelås m. Polstring
Art. Nr. 1413 Medium
Art. Nr. 1414 Large



Hoftesele med polstring
Art. Nr. 1417 Medium
Art. Nr. 1418 Large



H sele
Art. Nr. 1415 Medium
Art. Nr. 1416 Large

Tilbehør diverse



Sikkerhetssele avlaster
Til 3 punkt sele, H/V montering
1419



Armlener H. Side
Art. Nr. 1420
Armlener V. Side
Art. Nr. 1421



Armleneveske
Art.nr: 1422



Fotbrett. (Legg lengde 32 til 46 cm)
Art. Nr. 1423

Fotbrett. (Legg lengde 40 til 54 cm)
Art. Nr. 1424



Leggputer
Art.nr: 1425
Fotbrettreimer
Art.nr: 1426



Vrightholder Art.nr: 1427



Inkontinenstrekk Sittepute
Setebredde 52 cm Art. Nr. 1428
Art. Nr. 1428
Inkontinenstrekk Sittepute
Setebredde 57 cm
Art. Nr. 1429



Inkontinenstrekk rygg (nedre del)
Setebredde 52 cm
Art. Nr. 1430
Inkontinenstrekk rygg (nedre del)
Setebredde 57 cm
Art. Nr. 1431



Abduksjonskloss / bendeler
Art.nr: 1432



Trekantpute til, mellom sete og rygg
Til setebredde 52 og 57 cm
Art.nr: 1433



Pute som gjør setet flatt når ryggen legges helt bakover.
Ca sittedybde må oppgis og setebredde 52 eller 57 cm
Art.nr: 1434



Trykkavlastning	Art. nr	HMS. Nr	Kryss av
Trykkavlastende Gelpute 2,5 cm tykk (Hele seteflaten)	1441		



Monteringsalternativer	Art. nr	HMS. Nr	Kryss av
------------------------	---------	---------	----------

Montering på Turny EVO med el. tilkobling	1436		
---	------	--	--

Montering på Turny HD /Orbit. Med el. stopp/ tilkobling	1437		
--	------	--	--

6 veis

Monteringsett 6 veis Autoadapt	1438		
--------------------------------	------	--	--

6 veis

Monteringsett 6 veis Handicare	1439		
--------------------------------	------	--	--



Montering på skinner eller i gulv

Fleksikonsoll høyde og sideregulerbare. ben
Art.nr: 1440



Kyfose (rygg øvre del) 45 grader justering.
Rygghøyde justering. 53 til 71 cm



Sittedybde. Fra 37 til 55 cm



Tilt sittepute. 25 grader



Regulering. Bredde, sidevanger rygg og kne/lårstøtter



GS seat as

Musmyrveien 31
3520 Jevnaker
Vår ref: Guttorm Sæther

Tlf: +47 922 45 181
guttorm@gsseat.no
invoice@gsseat.no

Org.nr. NO 993 644 617 MVA
Bank: Hønefoss Sparebank 2230.10.85072